

Mode d'emploi : Hemoccult II®

- Toutes ces opérations doivent être réalisées dans un délai de 7 jours et jamais pendant les règles.
- Éviter de consommer de la vitamine C sous forme de médicament dans les jours précédant le test.

1 Collez une des étiquettes code-barres à votre nom, reçues avec votre invitation, sur :

- la fiche d'identification,
- et chacun des 3 tests Hemoccult.

➤ Remplir la fiche d'identification.



2 Recueillez vos selles sans urines sur un support sec, par exemple : un journal, une assiette en carton, un pot de chambre.

➤ Évitez tout contact avec du détergent (eau de javel...).



Journal



Assiette en carton



Pot de chambre


3 Ouvrez une plaquette du côté indiqué,

➤ Avec un bâtonnet qui vous est fourni, déposez une petite quantité de selles (équivalent à une lentille ou un grain de riz) dans le cadre A, en évitant de dépasser les bords, puis jetez le bâtonnet.



4 A un autre endroit de la même selle, renouvelez l'opération avec un autre bâtonnet, et déposez dans le cadre B en évitant de dépasser les bords.

➤ Refermez la plaquette et conservez à température ambiante.

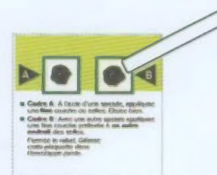

5 Renouvelez l'opération les jours suivants, sur les 2 autres plaquettes.

➤ Le dernier jour, placer les 3 plaquettes dans le sachet en plastique fourni.



6 Insérez dans l'enveloppe T :

- la fiche d'identification + le sachet plastique contenant les 3 plaquettes.

➤ Poster de suite l'enveloppe T, sans timbrer.

